

# Tu Nuevo spray frío Septodont



**CryoPulp**

Spray de froid  
Cold Spray

(FR)

**Type d'application :**  
Le spray de froid contient un gel rapide de pellets en matière synthétique, pour le traitement des dents dans le domaine de la dentisterie et pour le refroidissement de matériaux pour empreintes, comme l'hydrocolloïde, etc.

**Consignes d'utilisation :**  
Pulvériser l'objet à refroidir à une distance d'environ 2 à 3 cm pendant 1 à 2 secondes. Ne pas appliquer directement dans la bouche, sous peine de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, etc.

**Consignes de sécurité :**  
H 222 - H 229 Aérosool inflammable. Réagit sous pression ; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, etc. Ne pas fumer. Ne pas porter de vêtements enflammés. Ne pas brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Ne pas pulvériser sur des flammes nues ou toute autre source d'inflammation. Conserver hors de la portée des enfants.

SEPTODONT  
[www.septodont.com](http://www.septodont.com)

PRISMA GmbH  
Otto-Hahn-Ring 4-5  
64653 Lorsch, Germany  
Tel: +49 (0) 69 35 98 10

## CryoPulp

Spray frío  
con sabor a menta




# CryoPulp - el nuevo spray frío de Septodont

CryoPulp es adecuado para la congelación rápida de los gránulos de espuma para pruebas de vitalidad de los dientes en la odontología y el enfriamiento de los materiales de impresión/fundición, es decir, hidrocoloides, etc.

Características	Ventajas	Beneficios
Boquilla de aplicación	Pulverización precisa	Facilidad y seguridad de uso
Gas butano-propano	Buen poder de enfriamiento	Eficiente
Aromas de menta	Agradable	La aceptación de los pacientes

## Como usar

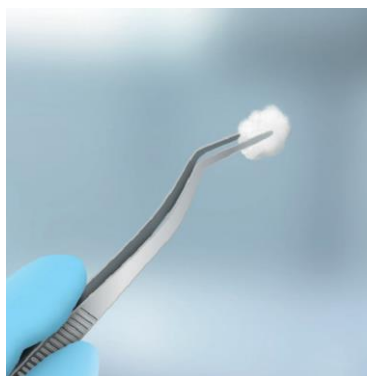

Usar la bolita de algodón



Pulverizar 1-2 segundos desde la distancia de 2-3 cm



La bolita debe aplicarse en el área medio-facial del diente. Los dientes adyacentes o contralaterales «normales» también deben ser probados

## Información del producto

- 200 ml
- Temperatura de salida  $\leq -40^{\circ}\text{C}$
- Dispositivo médico de clase I



Distribuidor:

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France  
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00 - Fax : +33 (0)1 48 85 54 01

Por favor, visite nuestra página web para más información:

[www.septodont.es](http://www.septodont.es)

