



GEMINI[®]

810 + 980 DIODE LASER




LONGITUD DE ONDA DUAL.
INIGUALABLE.

INIGUALABLE

GEMINI 810 + 980 es el primer láser de diodo para tejido blando, diseñado en USA, provisto de una longitud de onda dual y con una potencia máxima de 20 vatios. El diseño elegante e innovador de la pantalla electro-luminiscente y su sencilla pieza de mano con luz le identifican como la última generación de láser de diodo.

■ CORTE FÁCIL Y MÁS RÁPIDO

El poder de la tecnología super-pulsed con un pico máximo de potencia de 20W en cortos impulsos, hace que los tejidos blandos se enfríen durante el procedimiento, evitando la carbonización y el stress térmico (mayor comodidad del paciente). Esta tecnología hace que los cortes sean rápidos y eficientes y además facilita la rápida cicatrización de los tejidos.

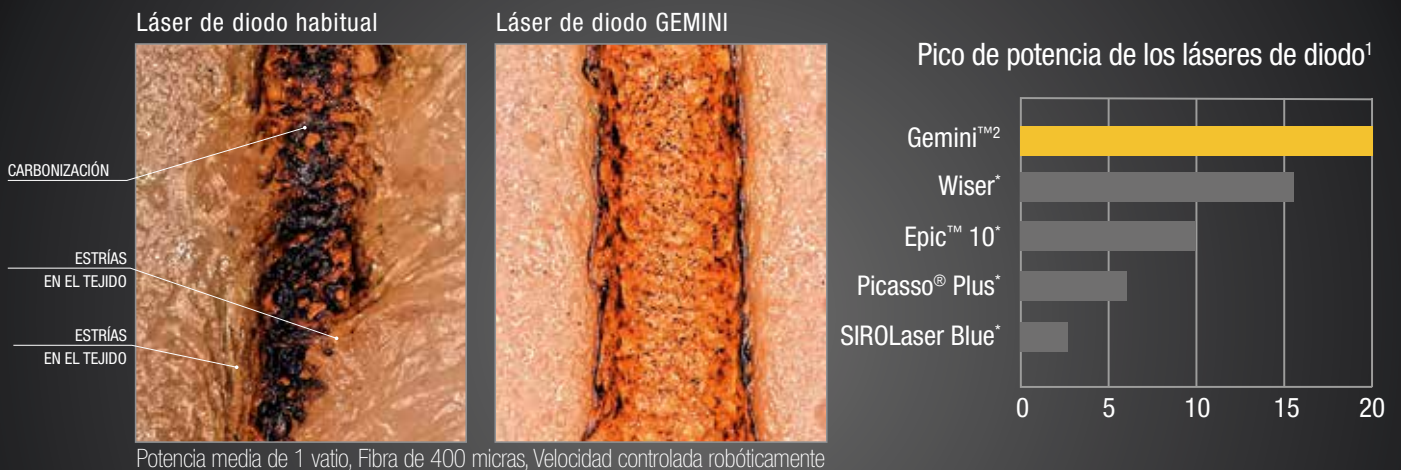

■ MAYOR VERSATILIDAD CLÍNICA

La longitud de onda Dual combina la absorción óptima de melanina con una longitud de onda de 810nm con la absorción óptima de agua con la longitud de onda de 980nm. El láser de diodo GEMINI te permite usar individualmente la longitud de onda deseada dependiendo del tratamiento a realizar.

■ PANTALLA TRANSPARENTE ELECTRO-LUMINISCENTE

El diseño elegante e innovador de GEMINI ofrece una pantalla electro-luminiscente que le hace único en el mercado. El pedal inalámbrico y con batería GEMINI, le permite un fácil y sencillo cambio entre gabinetes.

¹ Datos publicados por el fabricante

* Wiser es un producto comercial de Lambda Spa - Mod. Func.:CW, Pulsed, Super Pulsed; EPICTM10 es una marca comercial de Biolase Inc. - Mod. Func.:CW Pulso modulado

Picasso[®]Plus es una marca comercial de AMD Laser - Mod. Func. Continuo Pulsed personalizable; SIROLaser Blue es una marca comercial de Sirona Dental - Mod. Func.:CW, Picos Pulsed.

² Pico de potencia en el modo doble longitud de onda

■ CÓMODO Y FÁCIL DE UTILIZAR

PROCEDIMIENTOS PRE-ESTABLECIDOS

19 procedimientos preestablecidos para los cuales el láser GEMINI proporciona automáticamente el ajuste óptimo de potencia y pulso. Los parámetros de los procedimientos preestablecidos pueden ser personalizados por el usuario.

FÁCIL ESTERILIZACIÓN

Pieza de mano esterilizable y puntas desechables.

ILUMINACIÓN DE LA PUNTA

La pieza de mano está equipada con la iluminación de la punta lo que proporciona una mejor visibilidad de la zona quirúrgica.



PUNTAS DESECHABLES DE UN SOLO USO

Disponibles puntas activadas de 5mm y opción de 7mm. Estas puntas se pueden curvar a elección del usuario y son desechables.

SOPORTE REMOTO

Asegura siempre un software actualizado y reduce tiempo y costes de asistencia.

GINGIVECTOMIA

Los casos clínicos cedidos por el Dr. Bob Miller - Park City, UT (USA)



Antes de la intervención



Inmediatamente después de la intervención



30 días después de la cirugía

FRENECTOMIA



Antes de la intervención



Inmediatamente después de la intervención




30 días después de la intervención

Ver vídeos de casos clínicos



GEMINI®

810 + 980 DIODE LASER

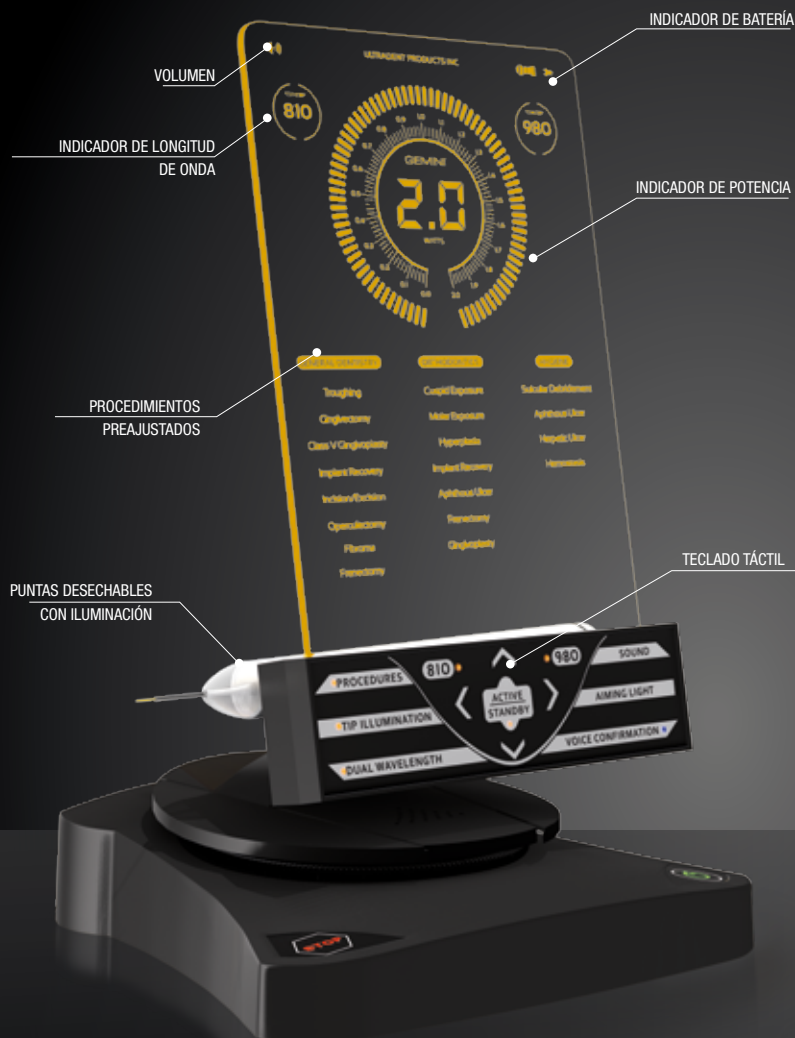

8990 Kit Láser GEMINI
 1 Fuente de alimentación
 1 Pedal inalámbrico
 1 Pieza de mano con luz
 10 Puntas 5 mm activadas
 3 Gafas de seguridad GEMINI

8991 Fuente de alimentación
 1 Fuente de alimentación

8992 Pedal inalámbrico GEMINI
 1 Pedal inalámbrico

8993 Puntas desechables 5mm GEMINI
 25 puntas de 5 mm

8994 Puntas desechables 7mm no activadas GEMINI
 25 puntas de 7 mm

8995 Gafas de seguridad GEMINI
 1 gafas de seguridad

8996 1 Carcasa de pieza de mano
 1 Carcasa

“Durante años he buscado un láser eficaz en el corte de los tejidos blandos y a la vez asequible económicamente. Con el láser de diodo GEMINI 810+ 980, encontré lo que estaba buscando! Ultradent finalmente puede ofrecer un láser de diodo único en su género, que combina un diseño elegante e innovador con la mayor versatilidad clínica. La longitud de onda Dual y la potencia máxima de 20W con la tecnología super-pulsed aseguran un corte rápido, fácil y efectivo a un costo accesible para todos”.

Dr. Dan Fischer - CEO Ultradent Products, Inc.



Introducción al láser de diodo GEMINI

Ultradent España - info@ultradent.es
 Área Norte: Tel. 619.558.249 - Área Levante: Tel. 616.982.237 - Área Centro: Tel. 699.888.731



ULTRADENT
 PRODUCTS, INC.

Improving Oral Health Globally