



## ENBIO PRO

- Dispositivo medico – clase IIb – certificado de conformidad CE
- Nueva categoría de autoclave
- Muy rápido
- Capacidad 5,3 litros
- Compacto - dimensiones externas : 561 x 270 x 202 mm
- Dimensiones bandeja de esterilización: 300 x 200 x 90 mm
- Peso : 20 kg
- Silencioso - 49 db
- Estético
- Fácil de instalar y utilizar
- Transparente – todo está mencionado en la pantalla
- Informes guardados en el USB
- Pruebas de vacío, Bowie & Dick, Helix
- 2 años de garantía
- Esterilización PRION
- Precio accesible – PVP 2100 EUR + IVA



## ENBIO **PRO** - PROGRAMAS



**9 min**  
**134°C FAST**  
**sin secado**  
**clase S**



**19 min**  
**134°C**  
**con secado**  
**clase B**



**30 min**  
**121°C**  
**con secado**  
**clase B**



**45 min**  
**134°C PRION\***  
**con secado**  
**clase B**

\*El programa **PRION** se dedica a la descontaminación de objetos que han tenido o se sospecha que han podido tener contacto con proteínas priónicas patológicamente alteradas (por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la EEB, etc.).


# PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO

## ENBIO **PRO**

Clase	B
Alimentación	230V AC / 50Hz
Potencia instalada	3250W
Consumo máximo de energía	15A
Presión de operación	2,1 Bar
Presión máxima	2,3 Bar
Temperatura máxima del proceso	138°C
Volumen de la cámara de proceso	5,3l
Diámetro interior de la bandeja	300 x 200 x 90 mm
Programas	134° C FAST, 134° C, 121° C, PRION

Número máximo de paquetes	16
Peso máximo de la carga	0,8 kg
Peso	20 kg
Grado de protección	IP20
Archivo de datos del proceso	USB Drive
Suministro de agua*	externo

\*solo agua desmineralizada o destilada de < 15 µS/cm

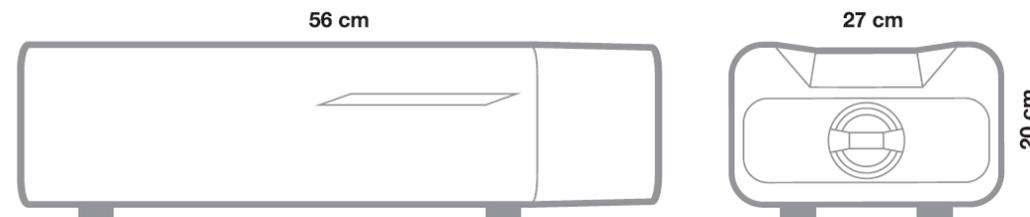

# ATRIBUTOS



## DOCUMENTACIÓN

No hace falta imprimir cada proceso de esterilización. Sus informes se guardan automáticamente en el USB.




## CÓMODO

Es ligero y silencioso. Puede trabajar cómodamente y esterilizar mientras atiende a su paciente.



## INTUITIVO

Sin programación. Sin autenticación. Esterilización en sólo tres pasos: enciéndalo, elige el programa y presione inicio.

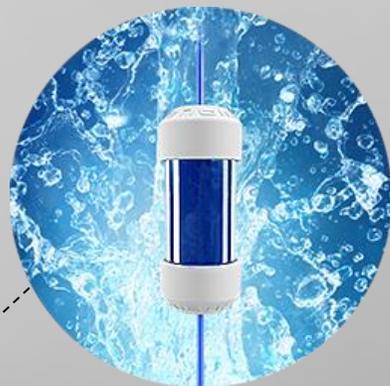

1x = 500 L

## MAGIC FILTER

Enbio Magic Filter es un filtro que permite reciclar el agua utilizada por el esterilizador. La resina de intercambio iónico contenida en el Enbio Magic Filter permite el tratamiento de las aguas residuales al nivel del agua desionizada.

PVP: 20 EUR + IVA