

# ENBIO<sup>®</sup>

# B CLASS



ENBIO<sub>s</sub> es el único autoclave capaz de esterilizar sus herramientas a la perfección en **7 MINUTOS.**



## CALIDAD

Garantice el máximo nivel de seguridad para usted y sus clientes con tecnología suiza.



## RAPIDEZ

Enbio S es el esterilizador más rápido del mercado.



## ESPACIO

Ahorre tiempo y esterilice varios paquetes de herramientas al mismo tiempo - ¡hasta 8 paquetes a la vez!



## SILENCIOSO

Produce menos ruido que las máquinas de café. Ahora puede trabajar cómodamente.



## AUTOMÁTICO

Se acabó el guardar e imprimir. Sus informes se guardan automáticamente en el USB insertado.



## INTUITIVO

Sin programación. Sin tener que registrarse para proceder. Esterilización en sólo dos pasos: enciéndalo, elija el modo y utilícelo.

Enbio S, como producto sanitario de clase IIb, cumple todos los requisitos relacionados con la directiva 93/42/CEE "Productos sanitarios".

Enbio S, como autoclave de clase B, cumple con todos los requisitos de la norma ISO EN13060 "Esterilizadores de vapor pequeños".

enbio<sup>®</sup>




PERFECCIÓN  
CERTIFICADA



ESTERILIZACIÓN  
CLASE B  
(TIPO MÁS ALTO)



CERTIFICADO DE  
DISPOSITIVO MÉDICO

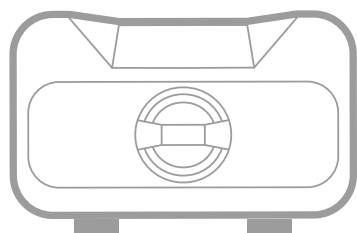

134°C  
FAST

7  
min

134°C

15  
min

121°C

30  
min

### Parámetros del dispositivo ENBIO®


Alimentación	220-230V AC / 50/60Hz
Potencia instalada	2250 W
Consumo máximo de energía	15A
Presión de trabajo	2,1 Bar
Presión máxima	2,3 Bar
Temp. máxima del proceso	137°C
Vol. de la cámara de proceso	2,7 l

Número máx. de paquetes	8
Peso máximo de la carga	0,5 kg
Peso	15 kg
Dimensiones	560 x 250 x 160 mm
Grado de protección	IP20
Archivo de datos del proceso	USB Memory stick
Conductividad (a 20°C) *	< 15 µS / cm

\*agua desmineralizada o destilada

## Enbio Care

Te cubrimos.

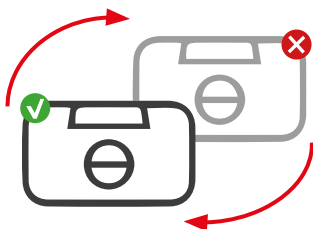

En caso de avería, entregaremos un  
dispositivo de sustitución

Garantía en el sistema **puerta a puerta** (enviamos un dispositivo de sustitución).