


# ENBIO<sup>®</sup>

El autoclave de clase B  
más rápido del mundo



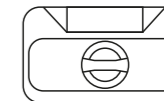

## Speedmaster.

Completa hasta 50 ciclos completos por día. Enbio esteriliza sus herramientas en un en un instante, y cambia su forma de trabajar. Ahora, puede preparar sus herramientas entre visitas de pacientes .


**7**  
**min**




Completa hasta 50 ciclos por día .

Tiene las herramientas listas cuando usted las necesita.

Reduce el número de costosas herramientas necesarias.

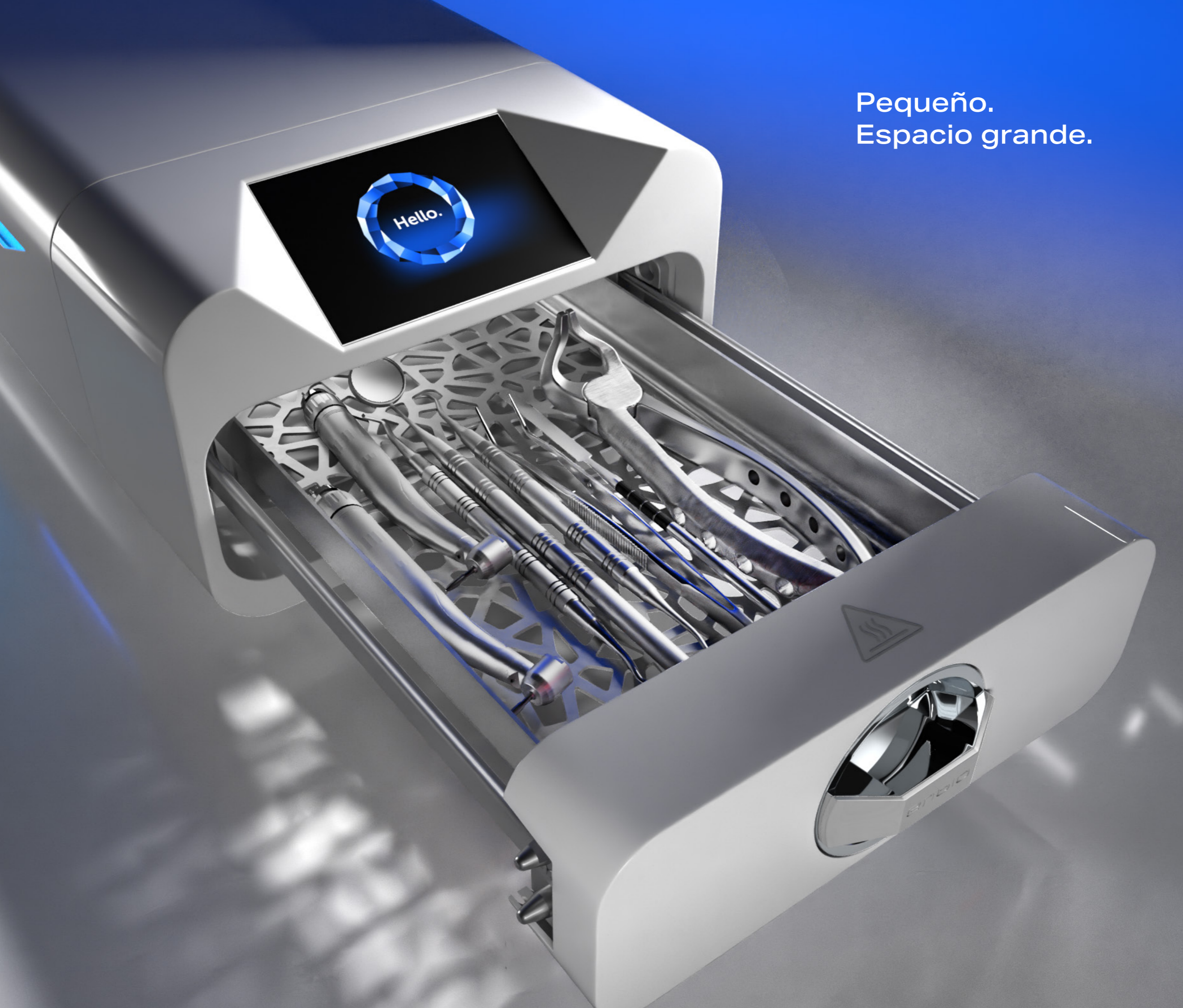

Pequeño.  
Espacio grande.

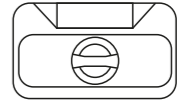


Esteriliza herramientas  
empaquetadas o sueltas.

Ultra compacto,  
con una rápida respuesta.

Increíblemente intuitivo:  
sólo hay que tocar  
la pantalla.

**B class**

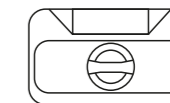

**La seguridad es  
la protagonista**

Se adapta a su entorno  
de trabajo.

Funciona de forma tan  
silenciosa que apenas lo  
notará en la habitación.

Muestre a sus pacientes  
que se toma su  
seguridad en serio.



**Funcionamiento intuitivo**



**Calidad demostrada por las pruebas**



**Clase B**


## Enbio Care

Te cubrimos



### Garantía

Su tranquilidad es lo más importa. Nosotros pensamos que sí.

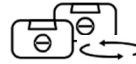

### Respaldo

Siempre se obtiene un dispositivo de sustitución por el tiempo de servicio.

Programa

**134°C  
FAST**

**134°C**

**121°C**

Tiempo de proceso total

**7 min**

**15 min**

**30 min**

Uso para

Herramientas sin envolver para uso inmediato.

La esterilización de herramientas envueltas más rápida del mundo.

Herramientas sensibles con elementos de goma textiles (por ejemplo, mascarillas).

Secado

-

Sí

Sí



### Technical data

Alimentación	<b>220-230V AC/ 50/60Hz</b>
Potencia instalada	<b>2250 W</b>
Consumo máximo de energía	<b>15A</b>
Presión de trabajo	<b>2,1 Bar</b>
Presión máxima	<b>2,3 Bar</b>
Temperatura máxima del proceso	<b>131°C</b>
Volumen de la cámara de proceso	<b>2,7l</b>

Numero máximo de paquetes	<b>8</b>
Peso máximo de la carga	<b>0,5kg</b>
Peso	<b>15 kg</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Archivo de datos del proceso	<b>USB Drive</b>
Suministro de agua externo	<b>&lt;15 µS/cm</b>
<small>*agua desmineralizada o destilada</small>	

### Certifications

Certificaciones  
De acuerdo con los requisitos de la norma europea EN 13060 y la Directiva 98/79/CE clase II b